

# Sonic Plus 1801 Manuale dell'utente

## Complimenti per la scelta!

Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente questo manuale dell'utente per conoscerne caratteristiche e note (cosa fare e cosa non fare) e come utilizzarlo al meglio.

Nota: caricare lo spazzolino sonico ("spazzolino" in breve nel seguente contenuto) completamente prima di usarlo per la prima volta.

## CAUTELE IMPORTANTI

### ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO

1. Controllare sempre attentamente il prodotto prima dell'uso. Non utilizzare se il prodotto appare danneggiato in alcun modo (testina, impugnatura, cavo USB).

2. Il cavo del pad di ricarica non può essere sostituito. Se il cavo si danneggia, eliminarlo e provvedete ad un nuovo acquisto.

3. Questo prodotto non contiene parti riparabili dall'utente. Non smontare, riparare o modificare il prodotto da soli. Solo tecnici professionisti qualificati per risolvere eventuali problemi. Fare riferimento a "GARANZIA E SUPPORTO" se il prodotto non funziona più correttamente o necessita di riparazioni.

4. Posizionare e conservare sempre il prodotto (cavo USB) lontano da bambini o disabili mentali.

5. Conservare sempre il prodotto in un luogo fresco e asciutto lontano da luce diretta.

6. Per evitare danni al prodotto, non posizionare la testina (incluso cappuccio protettivo), impugnatura, pad di ricarica o cavo USB in lavastoviglie per la pulizia.

7. Sostituire le testine ogni 3 mesi per ottenere risultati ottimali. Utilizzare solo le testine di ricambio originali.

8. Non utilizzare lo spazzolino durante la ricarica.

9. Il prodotto viene fornito con una batteria ricaricabile agli ioni di litio. Questa batteria è autonoma e non sostituibile dall'utente. La batteria deve essere smaltita correttamente quando non regge più la carica.

10. Riporre sempre e conservare il pad di ricarica a distanza di sicurezza da fonti di acqua (cioè lavandino o vasca)

11. Non cercare di recuperare il pad di ricarica se cade in acqua. Scollegare immediatamente.

12. Non utilizzare mai un pad di ricarica con un cavo danneggiato.

13. Non usare mentre si fa il bagno. Sebbene il prodotto sia IPX7 impermeabile, non può essere efficacemente protetto da acqua calda o vapore.

14. Questo prodotto è progettato solo per pulire denti e gengive. Utilizzare questo prodotto solo per l'uso previsto come descritto in questo manuale utente o come raccomandato dal vostro dentista.

15. Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di persone (inclusi bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano stati supervisionati o istruiti sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.

16. I bambini di età inferiore ai 7 anni non sono adatti ad utilizzare questo prodotto.

17. Questo prodotto è un dispositivo per la cura personale e non è destinato all'uso su più pazienti in uno studio od istituto dentistico.

18. Utilizzare computer certificati UL, l'hub USB o la presa duplex USB quando si carica lo spazzolino.

19. Per caricare efficacemente lo spazzolino, non posizionare il pad di ricarica su una superficie metallica magnetica.

20. Per il collegamento a una fonte di alimentazione non nel proprio paese, utilizzare un adattatore della configurazione corretta per la presa di corrente.

21. Consulta il tuo dentista prima di usare questo prodotto se hai avuto un intervento chirurgico orale o gengivale nei 2 mesi precedenti.

22. Contattare il proprio dentista se si verificano sanguinamenti eccessivi dopo l'uso di questo prodotto o il sanguinamento continua a verificarsi dopo 1 settimana di utilizzo.

23. Interrompere l'uso di questo prodotto e contattare il medico / dentista se si avverte disagio o dolore.

24. Questo prodotto è conforme agli standard di sicurezza per i dispositivi elettromagnetici. Comunque se si è portatori di pacemaker o di altri dispositivi impiantati, contattare il proprio medico o il produttore del dispositivo prima dell'uso.

25. Consultare il proprio medico se si hanno altri problemi di salute.

26. Questo spazzolino può essere usato su impianti ortodontici (le testine si consumano prima se usato su apparecchi) e restauri dentali (otturazioni, corone, faccette).

27. Può accadere di avvertire prurito, intorpidimento o anche un leggero sanguinamento se non avete mai usato uno spazzolino sonico. Le gengive si abitueranno alla vibrazione sonora in circa due giorni e il disagio si indebolirà in una settimana. Consultare il proprio medico se il disagio continua.

## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

2 testine con cappuccio igienico trasparente

1 impugnatura

1 cavo USB o un pad di ricarica


1 manuale dell'utente

Nota: il contenuto della confezione può variare in base al modello acquistato

## SPECIFICHE TECNICHE

Modello n.	Sonic Plus 1801
Dimensioni	251x30.5x29mm
Frequenza	37,000~40,000VPM
Modalità di pulizia	Clean, Sensitive, Gum care, White, Polish
Tensione	3.3~4.2V
Batteria	Ioni di Litio da 2.000 mAh, durata circa 90 giorni con una singola carica
Ricarica	Circa 6 ore per ricarica completa
Avviso batteria scarica	Rosso lampeggiante + motore vibrante
Pulsante di accensione	Per passare da una modalità all'altra premere il pulsante di accensione due volte in meno di 5 secondi. Per spegnere lo spazzolino, premere nuovamente il pulsante di accensione dopo 5 secondi.
Indicatore di carica	In carica: rosso fisso - Completamente carico: verde fisso per 30 secondi e poi spento
Impermeabilità	IPX-7
Smart memory	La modalità di pulizia del tuo ultimo utilizzo sarà ricordata e attivata al prossimo utilizzo.
Testina	Setole Dupont alimentari con cappuccio protettivo
Rumore	<60dB
Peso	135g (con testine)

## SCHEMA DEL PRODOTTO

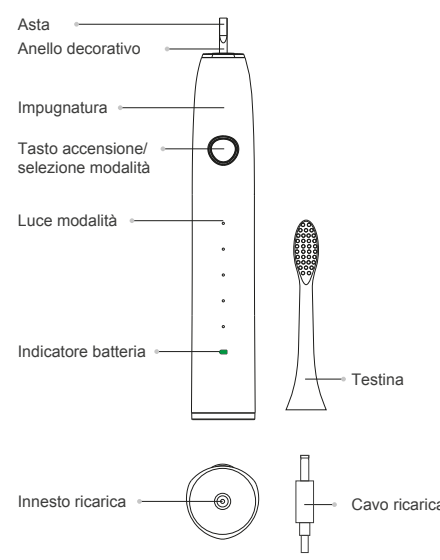


## MODALITÀ DI PULIZIA



## COME INSTALLARE LA TESTINA

Allineare la testina in modo che le setole siano rivolte nella stessa direzione della parte anteriore dell'impugnatura. Premere saldamente la testina verso il basso sull'asta metallica finché non si ferma.

È normale vedere un leggero divario tra la testina e l'impugnatura.

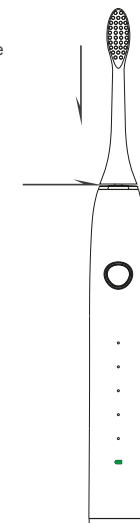

## COME USARE LO SPAZZOLINO


- 1 Premere il pulsante di accensione per accendere lo spazzolino
- 2 Premere di nuovo entro 5 secondi per selezionare la modalità preferita.
- 3 Dopo aver selezionato la modalità preferita premere il pulsante di accensione per 2 secondi. Lo spazzolino si spegnerà e memorizzerà la modalità scelta
- 4 Bagnare le setole e applicare una piccola quantità di dentifricio
- 5 Posizionare le setole contro i denti e premere il pulsante di accensione per accendere lo spazzolino

## COME SPEGNERE LO SPAZZOLINO


- 1 Dopo aver completato la pulizia (2 minuti), lo spazzolino si spegne automaticamente
- 2 Premere il pulsante di accensione per spegnere lo spazzolino.

## SUGGERIMENTI PER LA PULIZIA


- 1 Ogni 30 secondi la funzione quadpacer ti ricorda di spazzolare ogni sezione della tua bocca. Nota: per assicurarti di spazzolare uniformemente tutti i denti, dividi la tua bocca in 4 sezioni usando la funzione quadpacer.

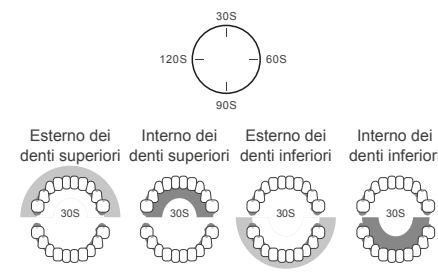


- 2 Per ottenere una migliore pulizia, spazzola i tuoi denti con una leggera angolazione (45 gradi).

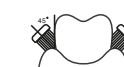


- 3 Tenere delicatamente le setole posizionate sui denti e nel margine gengivale. Lavati i denti con piccoli movimenti avanti e indietro.

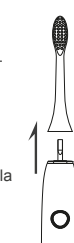

- 4 Estrarre la testina nella direzione della freccia per la sua sostituzione.


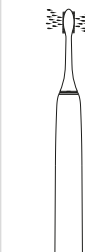


- 5 Assicurarsi di aver spento lo spazzolino prima di toglierlo dalla bocca per evitare spruzzi di dentifricio.

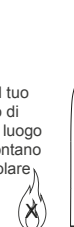

- 6 Se non hai intenzione di usare il tuo spazzolino per un lungo periodo di tempo puliscilo e conservarlo in luogo fresco e asciutto. Posizionare lontano da fuoco, oggetti caldi o luce solare diretta.

- 7 Risciacquare la testina con acqua dopo ogni uso. Pulire l'intera superficie dell'impugnatura con un panno morbido o asciugamani.

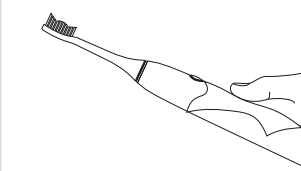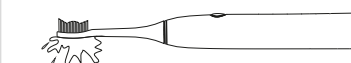

- 8 Carica dello spazzolino

**Indicatore di carica**  
In carica: rosso fisso  
Completamente carico: verde fisso per 30 secondi e poi spento

## GARANZIA E ASSISTENZA



Aquolab garantisce il prodotto per due anni dopo la data di acquisto. Difetti dovuti a materiali difettosi e manodopera saranno riparati o sostituiti da Aquolab (inclusi rivenditori e distributori) a spese di Aquolab a condizione che sia fornita prova di acquisto nel periodo di garanzia previsto. Aquolab consiglia l'uso di testine originali per prestazioni ottimali. L'uso di altre testine può danneggiare lo spazzolino e limitare la protezione della garanzia. Contattare il rivenditore locale o inviare un'e-mail a info@aquolab.com per il servizio di garanzia.

### ESCLUSIONI DI GARANZIA

Cosa non è coperto da garanzia:

- Testine.
- Danni causati dall'uso di parti di ricambio non autorizzate o testine non autorizzate.
- Danni causati da uso improprio, abuso, negligenza, alterazioni o riparazione non autorizzata.
- Usura normale, inclusi scheggiature, graffi, abrasioni, scolorimento o sbiadimento.
- La prova di acquisto è stata alterata, cancellata o rimossa.

Tutte le garanzie implicite, comprese le garanzie di commerciabilità e l'idoneità per uno scopo particolare sono limitati alla durata di questa garanzia. Aquolab o uno dei suoi affiliati o le società controllate non sono responsabili di danni accidentali, consequenziali o di altro tipo basati sulla violazione di garanzia, violazione del contratto, negligenza, illecito o altra fattispecie legale. Tali danni includono, senza limitazione, la perdita di risparmi o entrate, perdita di profitto; perdita di utilizzo; le rivendicazioni di terze parti incluse, senza limitazione, dentisti e igienisti; il costo di qualsiasi apparecchiatura o servizio sostitutivo.

Se è necessario inviare il prodotto al rivenditore o ad Aquolab per la riparazione o la sostituzione, i seguenti punti devono essere rispettati per la manutenzione e la restituzione del prodotto:

1. Per la restituzione in garanzia includere una qualche forma di prova d'acquisto, come la copia di una ricevuta di vendita o della fattura. Assicurarsi che la data di acquisto e il numero del modello del prodotto siano chiaramente leggibili. Se gli originali vengono inviati, non possono essere restituiti;

2. Inviare l'intero prodotto;

3. Imballare il prodotto in modo sicuro per evitare danni durante il trasporto. Se possibile, utilizzare il materiale di imballaggio originale;

4. Allegare una descrizione di cosa è accaduto con il prodotto. Includere, scritto chiaramente, nome e indirizzo a cui deve essere restituito il prodotto, con il numero di telefono (richiesto per spedizione). Si prega di compilare il presente modulo di informazioni del cliente:

Modello :	Nome e cognome :
Data di acquisto :	Telefono :
Email :	
Indirizzo :	
Descrizione del problema :	

Prodotto: Sonic Plus 1801  
Tensione nominale: 3.7V  
Potenza nominale: 2.0W  
Prodotto per: EB2C SRL  
Indirizzo: Via Montevideo 13, 20144 Milano, Italy  
Email: info@aquolab.com  
Product Standard: GB4706.1-2005 GB 4706.59-2008  
MADE IN CHINA

